

Baño de Flotación con Secado


*Modelo:

ECO-BSD

El baño de flotación ECO-BSD de ECOSHEL exhibe características ideales en un producto de importación, así como mejoras y modernización del diseño. Esto lo convierte en la primera elección en cuanto a la adquisición de un baño de flotación para cortes de muestras de tejidos incluidos en parafina, durante el procesamiento de muestras de histología. Es muy útil en laboratorios de investigación biomédica, medicina forense y diagnósticos de rutina de patología.

El equipo está diseñado para cubrir las necesidades de los operadores, ya que cuenta con un diseño práctico, función precisa de memoria de temperatura y exhibe un par de temperaturas en su pantalla LED, con lo cual se busca mejorar las condiciones de trabajo de los operadores, haciendo la rutina más cómoda y eficiente.

*Voltaje:	110/220 \pm 10% V
*Corriente eléctrica asignada:	3A
*Potencia:	350W
*Precisión de control de temp.:	$\leq \pm 2^\circ$ C
*Intervalo de regulación de temp.:	0° C ~ 99° C
*Visualización de parámetros:	Pantalla LED, (muestra valores establecidos y valores de medición)
*Accesorios:	2 Fusibles de repuesto 1 Desarmador
*Características adicionales:	Función precisa de memoria de temperatura Microprocesador de control de temperatura Protección contra sobrecalentamiento. Función de modo de espera
*Materiales de fabricación:	Exterior: Aluminio soldado; Interior: Material calorífico PTC y tetrafluoroetileno, resistente a la corrosión.

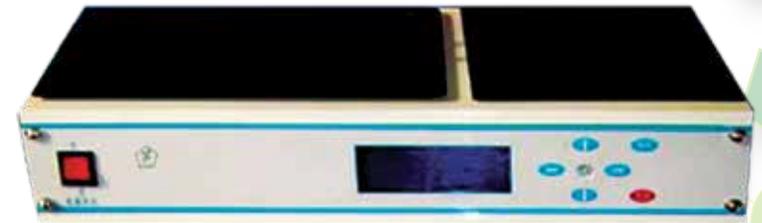

Garantía: 1 año
Fabricación: USA
Marca: ECOSHEL

En atención especial a nuestros clientes y por seguridad de los usuarios, todos los equipos incluyen su instructivo en español, con información útil e importante para un mejor uso, desempeño y obtención del máximo aprovechamiento.

